

N° d'appel du téléalarm:

Mode d'emploi Smartlife

A l'intérieur, le module doit être mis sur le chargeur pour indiquer la présence de la personne à son domicile. La Montre sera portée pour déclencher les alarmes.

A l'extérieur, prenez le module avec vous car il sert à transmettre les alarmes. La montre ne fonctionne pas sans le module à l'extérieur. Vous pouvez déclencher les alarmes à l'aide du bouton de la montre

N°	Nom	Prénom	Adresse	Localité	Téléphone
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Déclencher une alarme.

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton d'appel d'urgence (de la montre ou du module). Votre Smartlife émet des bips et l'appel est lancé.

Vous pouvez communiquer avec vos proches uniquement au travers du module. (La montre ne comprend pas de micro)

Recevoir une alarme.

Pour entrer en communication avec la personne qui a besoin d'aide, acquittez l'appel en appuyant sur la touche 5 de votre téléphone.

En acceptant l'appel, la personne reçoit automatiquement les coordonnées GPS par SMS ou par E-mail en 2 fois, la 1^{ère} au début de l'appel (la dernière position relevée avant l'appel) et la 2^{ème} à la fin de l'appel (nouvelle localisation) . Pour que les coordonnées GPS soit précises, il faut rester en ligne au moins 3 minutes (dépend de la position des satellites).

Les coordonnées GPS ne peuvent être communiquées que si la personne se trouve à l'extérieur.

Que se passe-t-il s'il y a un répondeur ?

L'alarme s'interrompt uniquement si l'appelé appuie sur la touche 5 son téléphone. Si l'appelé n'a pas quitté l'alarme par le biais d'une pression sur la touche 5, le système appelle la personne suivante de la liste de 10 personnes maximum. L'opération se produit jusqu'à 5 fois. Si personne ne


peut être joint, toutes les personnes indiquées reçoivent un SMS ou un E-mail signalant que l'alarme a été déclenchée.

D'autres questions ?

Prenez contact avec nous au 032 / 886 81 00, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

L'affichage LED vert (4) reste allumé jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

Pour déclencher une alarme, il suffit d'appuyer 2 secondes sur le bouton d'appel d'urgence.

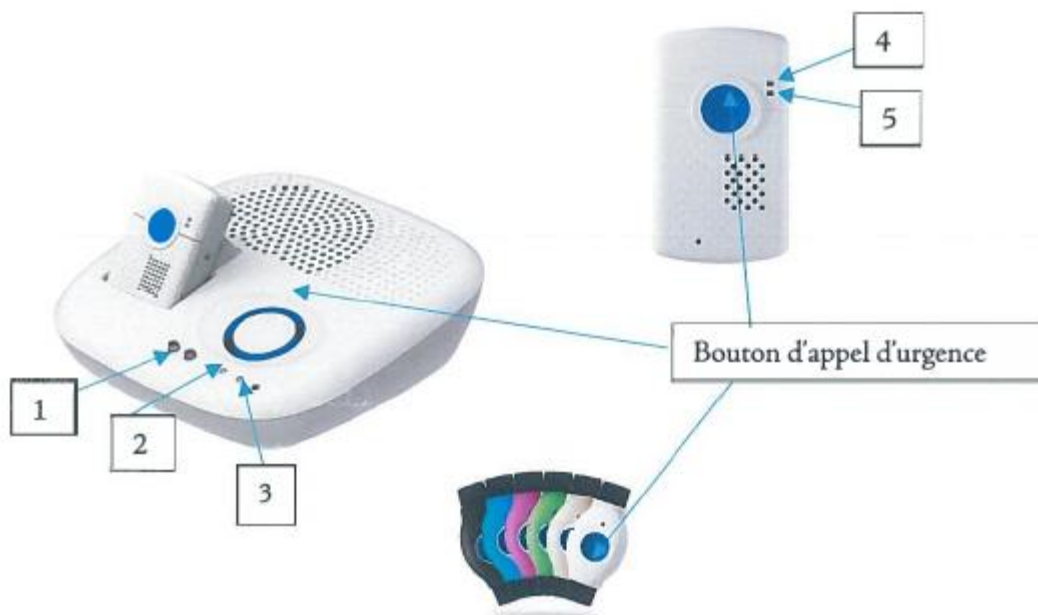

1. Volume
2. Vert allumé : station de recharge raccordée au courant
3. Bleu allumé : Flex dans la station de recharge
4. Clignote vert : Tout est OK / Vert allumé : batterie en charge
5. Clignote jaune : aucune réception mobile / Clignote en rouge : batterie presque vide